



シングルユース バックフラッシュハンドピース 25G/27G



25G/27G

ロングシャフト

ソフトチップ

高流量

*先端収納バックフラッシュ特徴

ハンドピース内にスプリング機構を採用しました。その為、リザーバー部を上下させるとバネの力で先端シリコンがスライドします。バネの力でシリコンがカニューレ内に押し戻されることがないので、術者は眼内での操作中にリザーバー部を押さえておく必要がありません。

- *シャフト全長：25G/33mm, 27GG/31mm (先端チップ長1mm含む)
- *先端チップ材質：ポリウレタン
- *ソフトチップ



スプリング機構の動画

製品名：DSP25G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き (VS0270.25)
 製品名：DSP27G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き (VS0270.27)
 製品名：DSP25G バックフラッシュ先端収納 アスピレーションチュービング付き (VS0275.25)
 製品名：DSP27G バックフラッシュ先端収納 アスピレーションチュービング付き (VS0275.27)

数量：5本 / 1箱
 販売名：Vortex シングルユース網膜硝子体用カニューレ
 認証番号：302AKBZX00036000



TID PHAROS ILLUMINATED DEPRESSOR

トドリッチ氏 イルミネータ ディプレッサー


Developed in collaboration with Bozho Todorich, M.D., Ph.D.

第3の照明デバイス

~ Market's ONLY One-piece, Complete illuminated Depressor ~

90°のサイド イルミネーション

使用中の写真

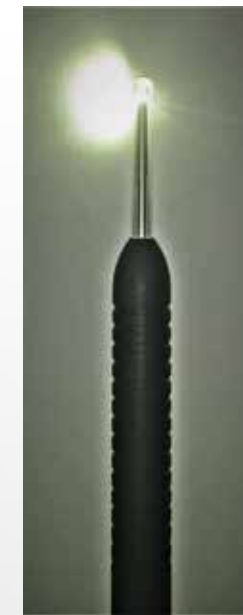

アクリル製ボールポイント型の先端



アダプターなしで機器へ接続可能



強膜圧迫 with イルミネータ

POINT!

術者自らで(サポートなしで)、強膜圧迫と照明操作を同時に行うことが可能です。
 術者自身で術中に両方をコントロールできることが利点です。

- * 圧迫箇所の混濁、出血、増殖膜等を除去吸引する処置に効果的な照明です。
- * TID はボール型の先端で強膜を圧迫しながら網膜基部に照明を同時に照らすことが可能です。

手術動画




"The TID Pharos is a next generation transilluminating depressor designed to offer surgeons unprecedented control and visualization for peripheral vitrectomy."
 - Dr. Bozho Todorich

品番：VS0801A (Alcon タイプ)
 入数：5本 / 1箱 (滅菌済み・単回使用)
 医療機器届出番号：13B1X00320000127
 販売名：トドリッチ氏イルミネータ ディプレッサー

ACTU8 TALON™

Dynamic Pressure Controlled Forceps


Your Next Generation ACTU8 Forceps!

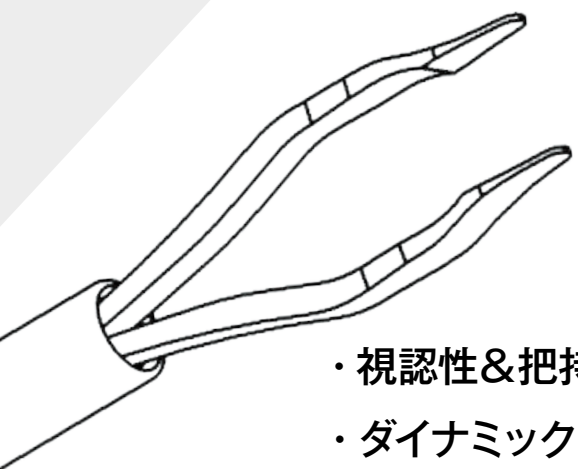

- ・視認性&把持力の向上
- ・ダイナミックプレッシャーコントロール (DPC)
- ・TALON ILM 25G
- ・TALON Pro-Grip 25G/27G
- ・TALON エンドグリップ 25G
- ・シャフト長 (先端含む) 25G 30mm / 27G 27mm

What is DPC??

ダイナミック プレッシャー コントロールは、鉗子先端の面全体に圧力を分散させる為、ハンドルを握る力に応じて鉗子の先端に力が伝わります。その為、膜をしっかり把持し、剥離し続けることが可能です。また、一度に大きなシートで膜を剥離が可能です。

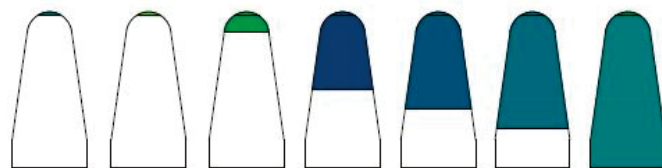

TALON TIP PRESSURE AS THE FORCEPS CLOSES

TALON ILM

VS0752.25 25G TALON ILM 鉗子

TALON PRO-GRIP

VS0751.25 25G TALON PRO グリップ 鉗子
VS0751.27 27G TALON PRO グリップ 鉗子

TALON エンドグリップ

VS0753.25 25G TALON エンドグリップ 鉗子



MKT-0001 rev A

Catalog Numbering and Ordering information are located on the reverse side

■ 販売元：Vortex Surgical

■ 製造販売元：株式会社ホワイトメディカル



ACTU8

PREMIUM DISPOSABLE INSTRUMENTATION

シングルユース硝子体手術用鉗子 25G/27G



シャフト長 (先端含む)
25G: 30mm / 25G ロング: 35mm
27G: 27mm / 27G ロング: 32mm

ILM 鉗子 (TALON 含む)



25G VS0752.25 (TALON)
25G VS0744.25-35
(ロングシャフト 35mm)
27G VS0744.27
27G VS0744.27-35
(ロングシャフト 32mm)
* 25G 通常シャフトのみ TALON モデル

テワリ氏 T2 鉗子




25G VS0742.25
25G VS0742.25-35
(ロングシャフト 35mm)

エイシメトリカル鉗子




25G VS0745.25

TALON PRO グリップ鉗子

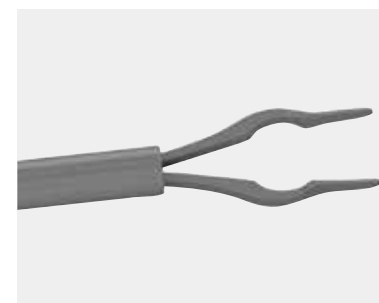

25G VS0751.25
27G VS0751.27

PROグリップ鉗子 (ロングシャフト)

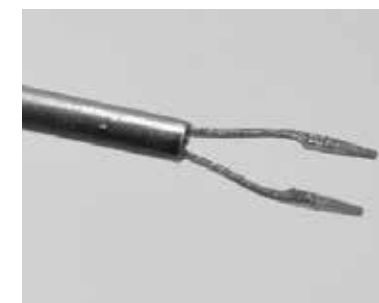

25G VS0713.25-35
(ロングシャフト 35mm)
27G VS0713.27-35
(ロングシャフト 32mm)
* TALON モデルではありません。

TALON エンドグリップ鉗子



25G VS0753.25
25G VS0743.25-35
(ロングシャフト 35mm)
* ロングシャフトは TALON モデル
ではありません。

数量：1 箱 5 本入り
販売名：Vortex ACTU8 ディスポーザブル フォーセプス
認証番号：231AKBZX00027000