


ケリソン氏 回転骨鉗子



- *シャフトはハンドルから取り外すことができ、異なるシャフトを一つのハンドルで共有できます。
- *シャフト先端部の角度は45度と90度があります。
- *シャフト先端部は2mmバイトと3mmバイトの2種類あります。
- *シャフト先端部は左回りにしか回転しない為、意図せずハンドルから外れることを防ぎます。
- *12時から13時までの間は“セキュリティストップ”になっており、それ以上の回転を防ぎます。

シャフトは360度回転して、先端部は7箇所固定されます。

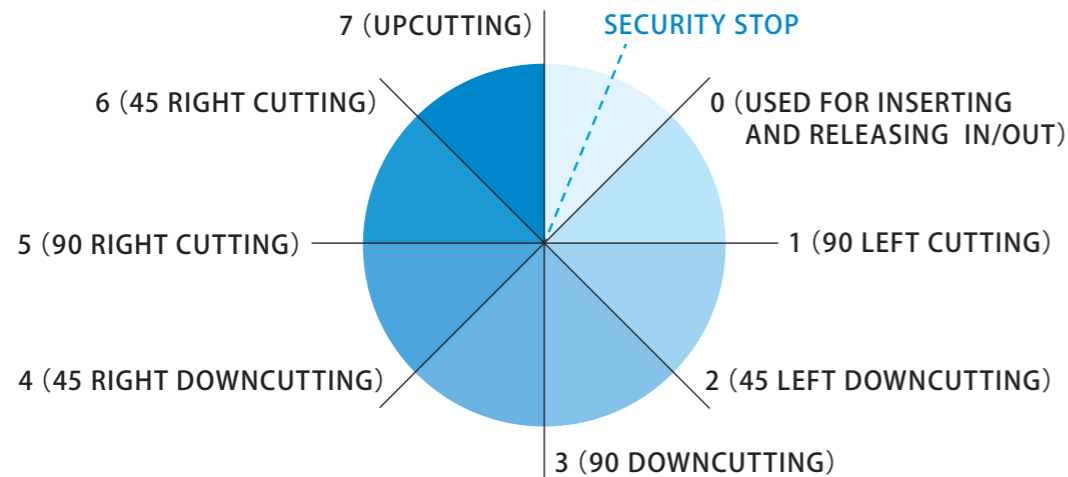

先端シャフトとハンドルの取り付け方法



シャフト部とハンドルは、お互いのIN/OUT部の位置を合わせて挿入します。

品番	製品名	先端形状
51-0872	ケリソン氏 回転骨鉗子 2mmバイト、45°	
51-0873	ケリソン氏 回転骨鉗子 3mmバイト、45°	
51-0882	ケリソン氏 回転骨鉗子 2mmバイト、90°	
51-0883	ケリソン氏 回転骨鉗子 3mmバイト、90°	
51-0860	ケリソン氏回転骨鉗子専用ハンドル	

許可番号：13BY006253

製造元

JEDMED (USA)

製造販売業者

WHITE MEDICAL

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL▶<http://www.whitemedical.co.jp>


DCR用手術器具 ～カタログ～

海外より厳選した器具を取り揃えました。

WHITE MEDICAL

極小麦粒鉗子

品番：27-400-02 / 全長：80mm 先端：4mm × 8mm

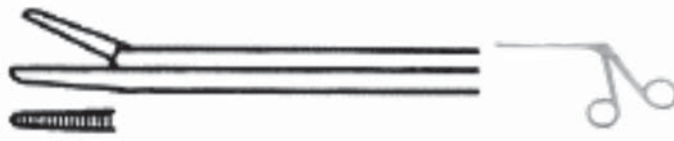

シャフト部が非常に細く、鼻腔内へのアプローチが容易にできます。鼻内からの涙道チューブの把持に最適で人気製品です。

篩骨鉗子

品番：54-0545 全長：140mm
先端：2.5mm × 6mm flat cups



鼻内方にて涙骨の摘出や細かい組織の把持に最適です。

骨鉗子

品番：51-1461 / 全長：180mm / 先端：2mm×15mm cup



先端形状が長細く、ファインな為小さな骨窓や切開層の深い場所からもアプローチが可能です。

丸ノミ・曲


品番：40-615-01 / 全長：155mm



先端部形状が細く、短い為、狭い切開箇所からでも大きく、厚い骨の除去が可能です。

細・裁除鉗子

品番：54-2991C 全長：195mm / 先端：3mm バイト

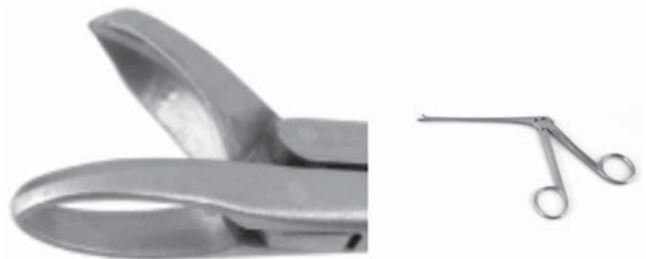

粘膜切除の際に使用します。内視鏡との挿入が容易で操作性が大変優れています。

鋭鉗子

品番：54-6130/ 全長：175mm 先端：3.5mm round cup



篩骨洞組織の除去に適しています。先端がCUP形状の為、組織を把持した際にズレません。また、粘膜切除や骨片の摘出などマルチに使用可能です。

のみ・直

品番：40-259-04
全長：160mm
先端幅：4mm



槌


品番：40-201-25
重さ：140g
先端：プラスチックカバー付き



その他の DCR 用手術器具

ケリソン氏 骨鉗子

※固定式

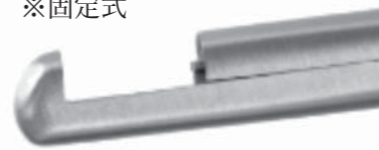


品番：51-1950 / シャフト長：110mm / 先端：3.5mm バイト、90°



鼻外からのアプローチに適しています。顕微鏡下での使用が可能です。

ケリソン氏 回転骨鉗子

※回転式

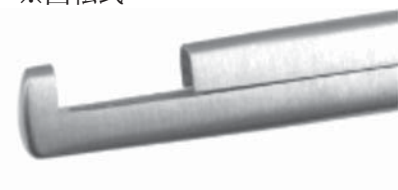

品番：51-0882+51-0860 / シャフト長：150mm・全長：260mm / 先端：2mm バイト、90°
*本製品は先端部とハンドル部が取り外し可能。*他にも先端部の種類がございます。



先端部が360°回転し、7か所での固定が可能です。器具の向きや手首を動かさず、鼻内からあらゆる目的部位へのアプローチが可能です。

鼻用ピンセット

品番：34-1011
全長：140mm
先端：1.5mm×18mm Tip

ガーゼ挿入時に使用します。手元が短い為、先端短部分の操作が容易です。先端部のかみ合わせが良く、鼻腔内への挿入も容易です。



マイクロ ケリソンパンチ

※固定式



品番：51-0510 / シャフト長：185mm / 先端：2mm バイト、90°
品番：40-014-02 / シャフト長：180mm / 先端：2mm バイト、40°
*本製品は一体型です。



先端部が細く内視鏡との挿入が容易です。鼻内からのアプローチに適しています。

涙点拡張針 3点セット

品番：10-610-05 (先端大・中・小)
全長：100mm
※3本セットでの販売となります。



フリーエレベーター

品番：51-2348 / 全長：190mm / 先端：鋭/鈍



粘膜剥離の際に使用します。先端部をファインに仕上げている為、内視鏡操作時に中鼻甲介の視野を広く見るのに大変有効です。

宮久保式 強湾マイクロ剪刀

品番：22-201-10 / 全長：100mm



先端部のブレードが大きく湾曲しております。鼻外からの粘膜切除がより容易にできます。

製造元

AS
Medizintechnik AS Medizintechnik (GERMANY)

JEDMED (USA)