

QuickRinse®

Instrument Rinse System



* QuickRinseは、フェイコ・I/Aハンドピースや硝子体手術器具・マイクロ手術器具等の中空内部をリンスするデバイスです。

* QuickRinseは、器具の中空内部に十分なリンスプレッシャーを供給できます。

* 特許取得のオートモードは15秒間ずつリンスとエアが自動で作動します。マニュアルでの作業がより効率が向上します。


「すすぎは大切です」

すすぎが不良で薬剤や洗剤が残留すると、中毒性前眼部症候群 TAS (toxic anterior segment syndrome) の危険性があるので、洗剤や消毒薬を用いる場合は、流水や蒸留水で十分にすすぐ必要があります。

「引用先」

眼科診療における感染対策ガイドブック
発行：NPO法人 HAICS 研究所

QuickRinse の使用写真

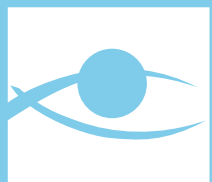

AOI
ADVANCED
OPTISURGICAL
INCORPORATED

特長

- * QuickRinse は、2つの器具を同時にリンスすることが可能で、よりスピーディになります。
- * QuickRinse は、オート・マニュアル・フットペダル (オプション) の3つのモードから選択できます。
- * QuickRinse は、リンスだけでなくエアーだけで使用し乾燥させることも可能です。
- * QuickRinse は、2つのボタンを操作するだけで簡単に使用することが可能です。

センチュリオン・ステラリスハンドピース用アタッチメント

右の基本アクセサリセットに追加してセンチュリオン・ステラリスハンドピース用のリンスアタッチメントをお付け致します。

	品番	製品名
基本セット	750-0000-000	QuickRinse システム
	430-4023-001	電源コード (120V)
	750-1100-001	電源アダプター
	750-3001-001	ポリボトル (1000ml)
	750-3008-004	ボトルキャップガスケット
	750-3013-001	エアー用 チューブ
	750-3014-001	エアー/リンス用 チューブ
	750-3015-001	ボトルキャップ
	750-4001-001	デュアルリンス用 Yアタッチメント
	750-5001-001	センチュリオン・ステラリス用 リンスアタッチメント
	750-6019-001	ナイロンブラシ
	750-7000-001	アクセサリフィッティングキット
	750-7000-002	Quick ディスコネクト O-Rings
	750-7004-001	ノーズ・コーン リンスアタッチメント

◎関連製品



カセット・ウォーター (蒸留水)

品番: CS16
容量: 4L/本
入数: 4本/箱

◎仕様

外形寸法	H270mm×W220mm×D220mm
重量	2kg
電源	100V-240V, 50/60Hz
最大流量	400cc/分
最大空気出力	33psi~36psi

製造元



販売元



株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>

セット内容

アクセサリフィッティング



ノーズ・コーンアタッチメント



ボトルキャップ・チュービング



電源コード



電源アダプター



ボトルキャップガスケット



O-Rings



Yアタッチメント



ナイロンブラシ

