

STATIMカセットオートクレーブ専用

# クリーン・ウォーター



1本は、2L入りで使用  
しやすくなっています。

STATIMカセットオート  
クレーブ専用の精製水  
です。

1箱は、6本入りです。

## ■仕様

品名	クリーン・ウォーター
品番	CL12
単位	1箱/6本入り

## 保管上の注意

1. 直射日光をさけてください。
2. 冷暗所に栓を閉めて保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。

発売元



株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル  
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688  
URL▶<http://www.whitemedical.co.jp>  
E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp

# ヨーロッパ基準 EN13060 適合




## Statim-S Cassette Autoclaves 2000S/5000S (最短6・9分滅菌完了)

### EN基準 (EN13060) 準拠

STATIM-S カセットオートクレーブは小型蒸気滅菌器規定の欧州基準 EN13060 で定められている「あらゆる滅菌物を安全に滅菌することができる」に準拠している高性能な小型蒸気滅菌器です。今まで以上に厳格な基準をクリアしより安全・安心してご使用頂けます。

### プレバキューム方式採用

STATIM-Sは、新たにプレバキューム方式を採用しました。カセット内の残存エアに陰圧をかけ外部に排出させ、空気溜まりを作らずより高いレベルの滅菌を可能にしました。

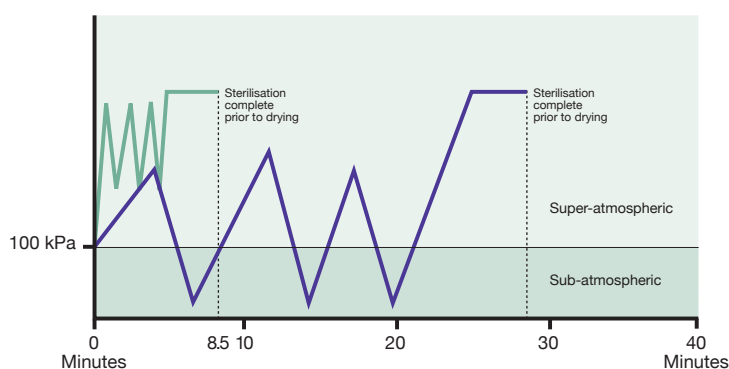

- STATIM2000S/134°、3.5分
- 従来のBサイクルオートクレーブ/134°、3.5分

### プリオンサイクル

従来の 134° 3.5 分の滅菌サイクルに加えて、134° 18 分滅菌のプリオンサイクルも選択が可能になりました。必要に応じてサイクル選択が可能となりました。

医療機器認証番号 第221AABZI00196000号

製造元

**SciCan**  
A HIGHER STANDARD

販売元

**WHITE  
MEDICAL**

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル  
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688  
URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>  
E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp