

JEDMED社

# ヘスバーク・バロン氏 真空トレパン

HESSBURG.BARRON VACUUM TREPHINE

この真空トレパンは、すぐれたカッティングをもつ、精巧に研磨されたステンレスブレードです。  
 ブレードの中心がレシipient角膜の視軸と一致するようにクロスヘアが付いています。  
 ブレードの切開深度は、一回転毎に0.25mmずつ進むよう精密に設計されています。  
 表層角膜移植及び全層角膜移植に最適です。



承認番号:20900BZY00983000



品番	サイズ
21-8260	6.0mm
21-8265	6.5mm
21-8270	7.0mm
21-8272	7.25mm
21-8275	7.5mm
21-8277	7.75mm
21-8280	8.0mm
21-8282	8.25mm
21-8285	8.5mm
21-8287	8.75mm
21-8290	9.0mm



Single-Use

STERILE

JEDMED社

# バロン氏 マーキング ドナー角膜パンチ

BARRON MARKING DONOR PUNCH

この角膜パンチは精巧に研磨されたステンレスブレードです。4本のスチール製のガイドピンとともにナイロンハウジングに埋め込まれ、ガイドピンとカッティングブロックの4隅のガイド穴によって、ドナー角膜とセンタリングされます。  
 カッティングブロックの窪みには4つの小孔があり、この小孔に、予め付属の滅菌済ペンでマーキングします。ドナー角膜上皮側に転写された4分円点は、レシipient角膜との縫合の目安になります。

品番	サイズ
21-8365	6.5mm
21-8367	6.75mm
21-8370	7.0mm
21-8372	7.25mm
21-8375	7.5mm
21-8377	7.75mm
21-8380	8.0mm
21-8382	8.25mm
21-8385	8.5mm
21-8387	8.75mm
21-8390	9.0mm
21-8395	9.5mm



Single-Use

STERILE

承認番号:20900BZY00984000

製造元

JEDMED

製造販売業者

WHITE MEDICAL

株式会社 ホワイトメディカル


〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル  
 TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688  
 URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>  
 E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp

# 角膜移植用手術器具

監修 東京歯科大学市川総合病院 眼科教授 島崎 潤

**F102** チタニウム縫合鑷子 無鉤

**INOR**

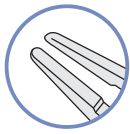

全長:87mm

**H-4286** カッチン角膜移植剪刀(左)

**ALBERT HEISS**



全長:100mm

**F104** チタニウム角膜縫合鑷子 前方突出型 有鉤 0.1mm


**INOR**



全長:87mm

**H-2636/4** 角膜(12ラインマーカ)

**ALBERT HEISS**

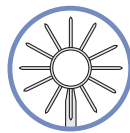

全長:105mm

**N104** チタニウムマイクロ持針器 曲 止なし

**INOR**



全長:110mm

**H-2588** パットンスパツェ

**ALBERT HEISS**



全長:142mm

**H-4302** マイクロ角膜剪刀(直)

**ALBERT HEISS**



全長:95mm

**H-2631** カリパーカストロヴィーホ氏20mm

**ALBERT HEISS**



**H-4312A** スプリングハンドル式剪刀 反鋭

**ALBERT HEISS**



全長:100mm

**H-3255/0** ダブル固定リング16×22mm

**ALBERT HEISS**



**H-4285** カッチン角膜移植剪刀(右)

**ALBERT HEISS**



全長:100mm

許可番号 13BY006253

製造販売業者



株式  
会社

**ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル

TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688

URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>

E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp